

SANGKEE

PISTOLA DE MASAJE MANUAL DE USUARIO

INSTRUCCIONES DE USO

POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

CARGA

- Cargue completamente la batería hasta seis horas antes de usarla por primera vez, ya sea conectada o desconectada del dispositivo.
- Para cargar, conecte el extremo de CC del adaptador de 24 V suministrado al puerto de carga de la batería y enchufe el cable lateral de CA a la toma de corriente.
- La banda de LED en las luces de la batería parpadea para mostrar el nivel de la batería e indicar carga activa.
- Con la batería conectada, las luces LED de la unidad parpadean para mostrar el nivel de la batería e indicar la carga activa. La carga completa se indica cuando todas las luces LED dejan de parpadear y permanecen completamente iluminadas. La batería se puede recargar en cualquier momento y con cualquier nivel de batería.No se recomienda agotar completamente la batería hasta el nivel del LED rojo.
- El tiempo de ejecución medio es de más de 2 horas, según el nivel de velocidad y la presión aplicada durante el uso.

OPERANDO

- Alinee y coloque la batería en la base de la unidad; asegúrese de que esté bien bloqueada en su lugar
- Encienda el dispositivo moviendo el interruptor de encendido en la parte inferior de la batería a la posición de ENCENDIDO. Apague el dispositivo moviendo el interruptor de encendido a la posición de APAGADO.
- Con el interruptor de encendido en la posición ON, presione el botón de encendido una vez para encender el dispositivo al nivel uno, dos veces para encender el dispositivo al nivel dos y tres veces para el nivel tres. Al presionar el botón de encendido nuevamente se apagará el dispositivo. Las luces LED azules indicarán el nivel de potencia correspondiente.
- Con la unidad apagada. Inserte completamente el aplicador presionando hacia adentro. Retire tirando de él. Masajee la parte del cuerpo deseada a la velocidad deseada aplicando presión según sea necesario.
- Para quitar la batería, presione ligeramente el botón de liberación de la batería con el pulgar. Tire firmemente hacia abajo de la batería / asa con la otra mano.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Utilice una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y séquelo con un paño suave.
- Para guardarlo o viajar, retire la batería y guárdela en la caja de cartón suministrada.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIÓN

- No sumergir en agua. Mantener alejado de líquidos o fuentes de calor. Mantenga los puertos de ventilación libres de polvo y escombros.
- No quite los tornillos ni intente desmontarlos.
- No opere de forma continua durante más de una hora. Deje que el dispositivo descansa durante 30 minutos antes de volver a utilizarlo. Desenchufe el cargador de la batería del dispositivo después de cargarlo o antes de usarlo.
- Sólo para uso de adultos. No lo use si está lesionado. Consulte a su médico antes de usar este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, Y LESIONES PERSONALES. ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:


- Sólo para uso de adultos.
- Úselo solo en una superficie del cuerpo limpia y seca sobre la ropa presionando ligeramente y moviéndose por el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región.
- Utilice el Hyper-volt solo en los tejidos blandos del cuerpo como desee sin producir dolor o malestar. No lo use en la cabeza o en cualquier área dura o huesuda del cuerpo.
- Use solo los aplicadores que brinden el mejor efecto deseado.
- Pueden producirse magulladuras independientemente del ajuste de control o de la presión aplicada. Revise las áreas tratadas con frecuencia y deténgase inmediatamente al primer signo de dolor o malestar.
- Mantenga los dedos, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo alejados del eje y la parte trasera del aplicador, ya que pueden producirse pellizcos.
- No coloque ningún objeto en los orificios de ventilación de la pistola de masaje.
- No sumerja en agua ni permita que el agua entre por los orificios de ventilación de la pistola de masaje No deje caer ni utilice incorrectamente la pistola de masaje.
- Recargue únicamente con el cargador de pistola de masaje de 26 V CC suministrado. Examine cuidadosamente el dispositivo y la batería antes de cada uso. No manipule ni altere la pistola de masaje de ninguna manera.
- Nunca deje la pistola de masaje en funcionamiento o cargando sin supervisión.

ESPECIFICACIONES



- 1 potente motor de alto par sin escobillas con tecnología Quiet Glide
- 2 Liberador de batería extraíble
- 3 baterías de litio recargables (más de 2 horas de uso por carga)
- 4 configuraciones de múltiples velocidades para una presión óptima
- 5 Inalámbrico y liviano (2.5 lb) *
- Incluye cargador de pared de CA
- 6 Interruptor de encendido / apagado
- 7 aplicadores intercambiables (x4)

Frecuencia de vibración:
Nivel1-30Hz, Nivel2-40Hz, Nivel3-53Hz
Peso:
2,5 libras / 1,1 kg
Carga:
110-240V 50 / 60Hz-5A-26VDC-1A
Capacidad de la batería:
2500 mAh
voltaje:
16,8 V

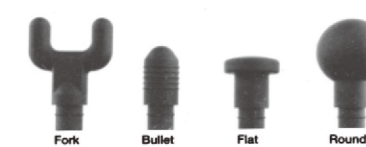

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

POR FAVOR NO USE LA Pistola de masaje O NINGÚN DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN SIN OBTENER LA APROBACIÓN DE SU MÉDICO SI SE APLICA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES:

Embarazo, diabetes con complicaciones como nefropatía o daño retiniano, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernias de disco, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, reemplazos recientes de articulaciones o DIU, clavijas o placas de metal o cualquier inquietud sobre su salud física. Las personas frágiles y los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen cualquier dispositivo de vibración. Estas contraindicaciones no significan que no pueda utilizar un dispositivo de vibración o ejercicio, pero le recomendamos que consulte primero a un médico.Se están realizando investigaciones en curso sobre los efectos del ejercicio con vibración para trastornos médicos específicos. Esto probablemente resultará en el acortamiento de la lista de contraindicaciones como se muestra arriba. La experiencia práctica ha demostrado que la integración del ejercicio de vibración en un plan de tratamiento es aconsejable en varios casos. Esto debe realizarse con el asesoramiento y acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

GARANTÍA

SI DENTRO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA DEBIDO A UN DEFECTO EN EL MATERIAL O LA MANO DE OBRA REPARARÁ O REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO O LOS COMPONENTES NECESARIOS. GRATIS.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE:

- (a) daños causados por accidente, abuso, mal manejo o transporte;
- (b) unidades sujetas a reparaciones no autorizadas;
- (c) unidades no utilizadas de acuerdo con las instrucciones;
- (d) daños que excedan el costo del producto;
- (e) deterioro del producto entregado como resultado de un almacenamiento anormal y / o condiciones de protección en ellocal del cliente;
- (f) no proporcionar el comprobante de compra con fecha.

Algunos estados y países no permiten una limitación de daños, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía garantiza derechos legales específicos, pero otros derechos pueden variar de un país a otro y de un estado a otro. Este servicio de garantía está disponible a través de las políticas operativas y los distribuidores internacionales.